


Pompe Ypsopump: Mise à jour de l'heure

Présentation du menu principal

Vous verrez trois icônes de menu simultanément à l'écran. Pour voir les autres icônes de menu, faites glisser le doigt vers la gauche sur l'écran. La barre de navigation située au-dessus des icônes indique le nombre d'icônes de menu disponibles. Les petits carrés mis en surbrillance en blanc indiquent votre position actuelle dans le menu principal. Lorsque vous commandez la pompe mylife™ YpsoPump®, vérifiez toujours que vous utilisez les différentes fonctions correctement.

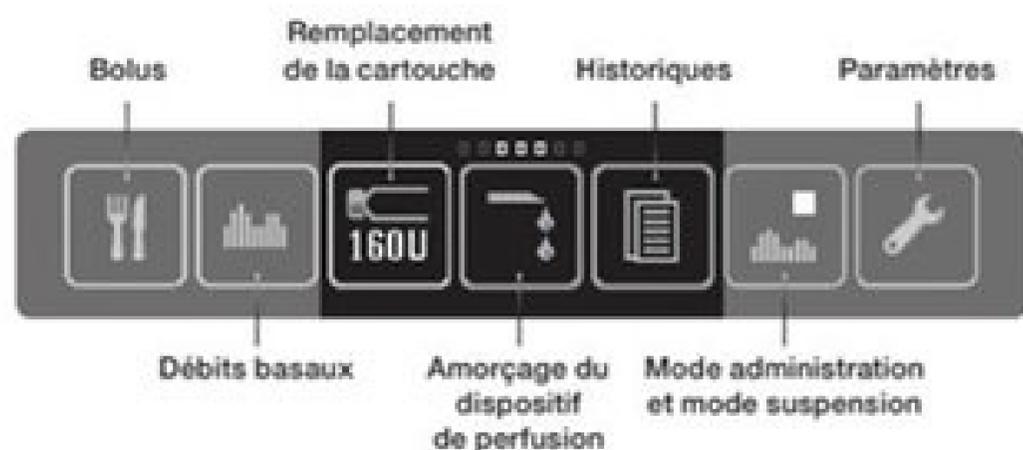

7 Fonctions et paramètres


7.1 Modification de l'heure



1/3: Appelez le menu principal et touchez l'icône "Paramètres".



2/3: Touchez l'icône "Heure".

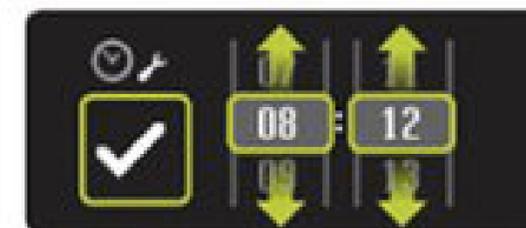

3/3: Réglez l'heure actuelle, confirmez en touchant , après quoi la pompe mylife™ YpsoPump® vibre brièvement. L'heure réglée est saisie dans les historiques de traitement.



Soyez particulièrement vigilant lorsque vous réglez l'heure. Un mauvais réglage de l'heure peut entraîner un décalage des heures du profil de débit basal. Ne modifiez vos réglages qu'après avoir consulté votre médecin ou votre spécialiste du diabète. Une programmation incorrecte de la pompe peut entraîner des dosages erronés d'insuline, susceptibles de provoquer des hypoglycémies ou des hyperglycémies. Si vous suspectez un risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, contrôlez plus souvent votre glycémie au cours des heures suivantes, conformément aux recommandations de votre médecin ou du spécialiste du diabète, et adaptez les paramètres d'administration d'insuline aux nouvelles conditions. En cas de doute, contactez immédiatement votre médecin ou un spécialiste du diabète.